

# sc aste re su



**Belmont**  
Made by hand and mind, in Japan



## CLESTA EURUS


FARETRA SPRIDO  
POLTRONA CONTOUR  
IDRICO SOLIDALE  
LAMPADA EURUS

# Tecnologia Made in Japan

## Funzionalità e comfort

La riconosciuta affidabilità delle poltrone Belmont, l'eccezionale precisione e silenziosità dei movimenti e le prestazioni al top in ogni condizione d'uso sono il frutto di una precisa scelta qualitativa Made in Japan. Basata su un know how unico e consolidato, la tecnologia oleodinamica si è evoluta nel tempo, ma è sempre rimasta il fulcro dei riuniti Belmont.

La poltrona del modello Clesta Eurus, disponibile in versione "Contour", è l'espressione più alta e recente della tecnologia Belmont e risponde appieno alle esigenze degli operatori del settore e dei pazienti. Tutto è curato nei minimi dettagli per una resa nel tempo assoluta e garantita:

- capacità di carico fino a 200 kg reali
- poggiatesta a doppia articolazione
- comandi a pedale o da console dottore/assistente
- due finiture di rivestimento: Standard e Luxury
-  trendelenburg > 12°



### Poggiatesta manuale

Il sistema a doppia articolazione del poggiatesta permette un'ampia varietà di regolazioni, con intervalli di 7,5° ciascuno, in modo da adattarsi perfettamente ad adulti, bambini, o disabili

### Bracciolo mobile Contour

La forma e le dimensioni del bracciolo sono state studiate per una perfetta impugnatura o appoggio da parte del paziente durante la seduta odontoiatrica; il meccanismo di rotazione agevola l'accesso e l'uscita dalla poltrona, in particolare per i pazienti anziani o con problemi fisici.

### Comandi poltrona "Joystick"

I movimenti della poltrona possono essere comandati integralmente tramite "joystick" a pedale in modo semplice ed intuitivo, garantendo al contempo la massima igiene e la totale libertà manuale del dentista.



## Poltrona

La meccanica idraulica di precisione assicura movimenti silenziosi, fluidi e precisi per un comfort del paziente insuperabile. Un meccanismo innovativo per la regolazione in altezza del poggiatesta ne rende estremamente semplice la movimentazione riducendo lo sforzo del 50%, con grandi benefici in termini ergonomici e di comfort per il dentista e/o l'assistente.

## Modello "Contour"

- Altezza ottimale di regolazione minima della seduta
- Elevata capacità di carico
- Salita/discesa fluida e senza scatti



# Cura dei dettagli

## Efficienza e semplicità

Clesta Eurus è un riunito essenziale ed affidabile, concepito per rendere più comodo il lavoro degli operatori prima, durante e dopo le sedute odontoiatriche. Piccoli dettagli ne esaltano le prestazioni, i vantaggi e l'ergonomia.

## Pedale full control

Tutte le funzioni in un unico dispositivo di facile utilizzo:

- Controllo micromotore tramite reostato a pedale
- Controllo proporzionale velocità turbina
- Pulsante per attivazione spray
- Pulsante Chip Blower
- Archetto per trasporto e movimentazione



## Supporto regolabile in altezza

Il braccio assistente è facile da movimentare ed è dotato di uno snodo opzionale che permette un'escursione in altezza min/max 170 mm. Gli strumenti sono sempre a portata di mano e manovrabili in qualsiasi situazione o posizione preferenziale da parte del dottore/assistente, anche quando operano singolarmente.



## Sistema di sicurezza

Il braccio della console è dotato di un sensore di sicurezza che previene le interferenze con la poltrona o oggetti esterni (es. i seggiolini), eliminando i rischi di incidenti o danneggiamenti.



## Praticità e igiene

Il blocco bacinella è facilmente smontabile per essere pulito con comodità e rapidità. Gestì semplici e senza fatica, tutte le volte che vuoi. Con un design più accattivante, Clesta Eurus è dotato di bacinella in vetro blu.



# Concretezza e affidabilità

## Il sistema Sprido Belmont

Tutto quel che serve quando si parla di qualità: stabilità e precisione del braccio faretra, movimentazione agevole ed ergonomica, una tavoletta strumenti completa e funzionale, comandi e display semplici e chiari. I materiali, gli ingranaggi e la meccanica del braccio faretra sono a prova d'usura per garantire affidabilità e durata. La tavoletta strumenti alloggia fino a 4 postazioni rotanti. I braccetti sorreggono i cordoni e permettono all'operatore di eliminare l'effetto tensione dalle mani durante l'utilizzo dei manipoli. Facile da programmare e da gestire, l'elettronica Made in Japan controlla in modo completo e intuitivo le funzioni principali degli strumenti e l'interfaccia con il gruppo idrico/poltrona. Clesta Eurus è equipaggiato con siringa, un micromotore induttivo Brushless con funzione Endo, ablatore e cordoni turbina. Sistema di pulizia strumenti "flush-out" incluso.



## Il gruppo idrico

Per il modello di poltrona Contour è stato sviluppato uno specifico gruppo idrico solidale, per fornire il massimo dei servizi. Il gruppo idrico è equipaggiato con selettore acqua di rete/bottiglia, con valvola selezionatrice d'aspirazione e, su richiesta, con uscite supplementari aria/acqua. L'accesso è facilitato da ampi pannelli che permettono qualsiasi intervento di pulizia o service in modo rapido e ottimale. Gli spazi interni sono stati studiati per alloggiare un'eventuale valvola sottobacinella o unità di separazione aria/acqua, con o senza recupero d'amalgama.



Rotazione a 90° del gruppo bacinella, per un comfort ottimale del paziente. Componenti facilmente smontabili per una perfetta igiene e pulizia.

## Nuovo sistema di illuminazione



Clesta Eurus è dotato della lampada a LED di nuova generazione Eurus, già conforme alle norme ISO 9680. Con una intensità luminosa variabile da 3000 a 28000 lux riproduce la luce naturale con una fedeltà impareggiabile.



Un sensore touchless permette di comandare le funzioni ON/OFF col semplice passaggio della mano, oltre che attivare la modalità composito gestita da due LED dedicati ed indipendenti.



### Stabilità eccellente

Il braccio compensato ad alta precisione permette una movimentazione fluida della lampada per un posizionamento perfetto ed immediato nella zona desiderata, senza inutili perdite di tempo per l'operatore. Il braccio ricopre un'ampia area di lavoro per un'illuminazione ottimale sia nei trattamenti dell'arcata mandibolare che mascellare.



### Vetrino coprilampade a LED

Una semplice levetta a pressione permette di rimuovere il vetro coprilampade per la pulizia della superficie interna.

## Optional



Specchietto paziente per lampada

### Alltri optional

- Piastra autoportante
- Telecamera intraorale
- Lampada polimerizzante
- Kit chiamata assistente
- Attacchi esterni aria/acqua



Braccio per monitor odontoiatrico

# Finiture tappezzeria

# Cartella colori



Tappeszzeria Luxury



Tappeszzeria Standard



scarica le caratteristiche tecniche dei nostri skai

## Seamless per la finitura •Standard

Coral Pink ES20	Camel ES14	Black ES8	Mint Blue ES5	LightGrey ES33	Gray Teal ES28
Rose ES34	Mauve ES27	Aldo Blue ES2	Ash Grey ES32	Scarlet Red ES24	Mandarin Orange ES22
Lemon Yellow ES2	Yellow Green ES18	Sky Blue ES7t	Blue ES29		

## Ultraleather<sup>(1)</sup> per la finitura •Standard •Luxury

Light Oyster 291-3720	Arctic 291-5684	Dove Grey 291-5666	Riviera 291-2552	Schooner 291-5806	Charcoal 291-5763
Parrot 291-4460	Citrus 291-5200	Sassy 291-5250	Apricot 291-8243	Buff 291-3609	Stone 291-3602
Hide 291-3610	Cave 291-3523	Cyan 291-2553	Lagoon 291-2527	Bayou 291-2685	Baltic 291-2551
Admiral 291-2556	Emerald Isle 291-7234	Herbal Mist 291-4314	Boysenberry 291-7214	Plum 291-9385	Red 291-1176
Poppy 291-1347	Autumn Leaf 291-8233				



# Comfort

## SEGGIOLINI BELMONT

I seggiolini Belmont completano la gamma in modo perfetto. La seduta e lo schienale sono regolabili in altezza ed inclinazione; disponibili nella versione dottore ed assistente. Materiali, forma e caratteristiche tecniche offrono al dottore/ assistente il massimo sostegno e comfort anche per i trattamenti di più lunga durata. Un'estensione in altezza min/ max incrementata ed ottimale permette di adattarsi alle caratteristiche fisiche e di stile di ogni utilizzatore.

### MODELLI PER DOTTORE




EURUS AH-012DL



### MODELLI PER ASSISTENTE



EURUS AH-012A

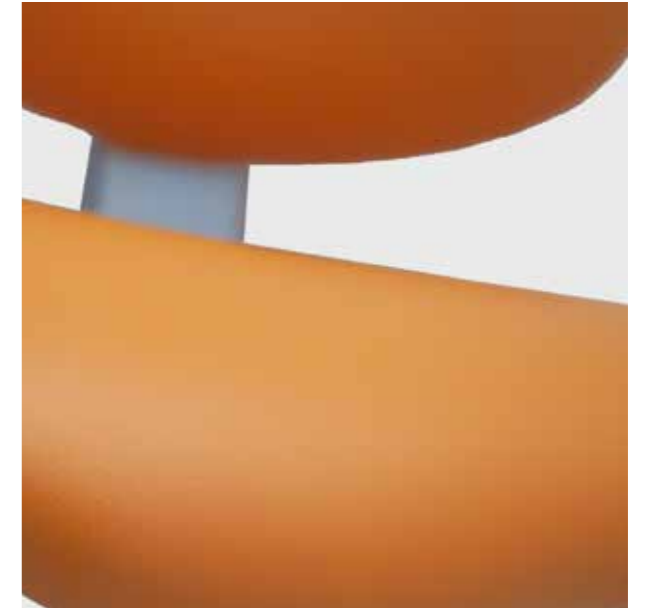

HANCHE AQ-010D



DH-007N





**Takara Belmont Italy s.r.l.**

**Sede e show room:**

via Mazzacurati 4/1 - Scandiano (RE)

T. +39 0522 086 548

E. [info@belmont-dental.it](mailto:info@belmont-dental.it)

[www.belmont-dental.it](http://www.belmont-dental.it)